




BIOPTRON[®] 
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepter Group

过滤器

繁體中文

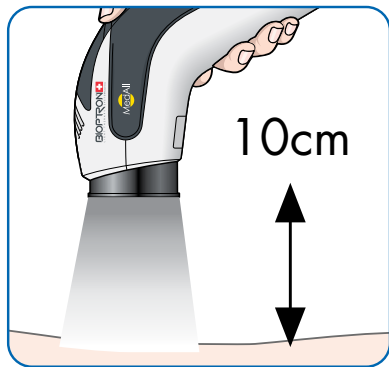

1



2



3



4

如何使用

從 10 CM 的距離，將 BIOPTRON 設備與所需的濾光片放在一起，覆蓋您欲治療的區域（圖 1）。當治療區域大於彩色濾光片直徑時，請根據建議的治療時間逐一進行治療。

如何更換濾光片

小心謹慎且輕輕地取出要更換的濾光片（圖 2），然後插入所需的彩色濾光片，如圖 3 所示。

請握持濾光片的外環，不要握持鏡片。

如何清潔濾光片（圖 4）

1. 握持濾光片的外環，從設備上卸下濾光片。
2. 使用柔軟、濕潤、無棉絨的布料，以避免刮傷玻璃表面。
3. 使用另一塊無棉絨之布料擦乾濾光片。

保固期

- 如果按預期使用並遵守警告，則具有 5 年保固
- 此保固期涵蓋材料和製造缺陷
- 此保固期不涵蓋因不影響產品性能之正常磨損而導致的外觀變化，或因產品誤用而造成的損壞。

警告

1. 請勿使用任何化學物質（例如異丙醇）清潔玻璃表面和濾光片環的內側或外側。
2. 請將濾光片存放於保護袋中，以防止積聚灰塵以及因暴露於陽光下而變色。
3. 濾光片由易碎玻璃製成，因此必須小心處理！
4. 使用者不得取下濾光片鏡片。



PMD-ME145-22-EN
BIOPTRON FILTER IFU



BIOPTRON AG
SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU, SWITZERLAND
PHONE: +41 43 888 28 00 | E-MAIL: LIGHT@BIOPTRON.COM



WWW.BIOPTRON.COM

繁體中文