




BIOPTRON® 
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepter Group

فیلتر

فارسی

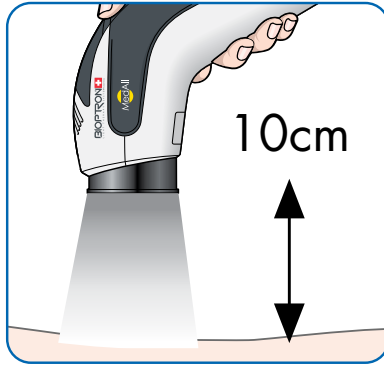

1



2



3



4

ضمانت نامه

- مدت ضمانت در صورت استفاده طبق کاربرد در نظر گرفته شده و رعایت هشدارها 5 سال می باشد
- این گارانتی شامل نواقص ناشی از مواد و ساخت می گردد

• این ضمانت شامل تغییرات ظاهری ناشی از سایش و پارگی معمولی که بر عملکرد محصول تأثیر نمی گذارد، یا آسیب های ناشی از استفاده نادرست از محصول نمی گردد.

هشدار

1. برای تمیز کردن قسمت داخلی یا خارجی سطح شیشه و حلقه فیلتر از هیچ گونه مواد شیمیایی (مانند ایزوپروپیل الکل) استفاده ننمائید.

2. فیلتر را در یک کیسه محافظ نگهداری کنید تا از گرد و غبار و تغییر رنگ در اثر قرار گرفتن در معرض نور خورشید در امان بماند.

3. فیلتر از شیشه شکننده ساخته شده است، بنابراین باید با احتیاط با آن کار کرد!

4. کاربرد اجازه برداشتن لنز فیلتر را ندارد.

نحوه استفاده

دستگاه Biopton را با فیلتر مورد نظر از فاصله 10 سانتی متری چنان قرار دهید تا ناحیه مورد نظر شما برای درمان (تصویر 1) را بپوشاند. در درمان نواحی بزرگتر از قطر فیلتر رنگی، آنها را یک به یک طبق زمان توصیه شده درمان کنید.

نحوه تعویض فیلتر ها

فیلتر را با دقت و بدون فشار خارج کرده (تصویر 2) و فیلتر رنگی مورد نظر را مطابق تصویر 3 جایگزین نمائید.

به جای لنز، حلقه بیرونی فیلتر را بگیرید.

نحوه تمیز کردن فیلتر ها (تصویر 4)

1. با نکه داشتن حلقه بیرونی فیلتر، فیلتر را از دستگاه جدا کنید.

2. برای جلوگیری از خراشیدگی سطح شیشه از یک پارچه نرم، مرطوب و بدون پرز استفاده کنید.

3. فیلتر را با یک پارچه بدون پرز دیگر خشک کنید.



PMD-ME145-22-EN
BIOPTRON FILTER IFU



BIOPTRON AG

SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU, SWITZERLAND
PHONE: +41 43 888 28 00 | E-MAIL: LIGHT@BIOPTRON.COM



WWW.BIOPTRON.COM

فارسی