




BIOPTRON® 
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepter Group

フィルター

日本語

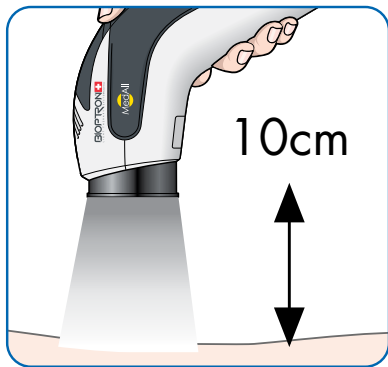

1



2



3



4

使用法

治療対象領域を照準として、目的のフィルターを装着したBIOPTRON装置を領域から10 CM離して配置します（写真1）。カラーフィルターの直径よりも広い範囲を治療する場合は、領域を区切ったうえで、推奨時間に従って治療してください。

フィルターの交換方法

C交換するフィルターを、力を入れずに慎重に取り出し（写真2）、目的のカラーフィルターを写真3のように挿入します。
レンズではなく、フィルターの外側のリングを持ちます。

フィルターの清掃方法（写真4）

1. フィルターの外側のリングを持って、機器からフィルターを取り外します。
2. ガラスの表面に傷をつけないように、糸くずの出ない柔らかい布を湿らせて使用してください。
3. 糸くずの出ない別の布でフィルターを拭きます。

保証：

- ・ 5年（想定通りに使用し警告を順守した場合）
- ・ この保証は、材料および製造上の欠陥も対象とします。
- ・ この保証は、製品の性能に影響しない、通常の磨耗による美観の変化や、製品の誤用による損傷は対象としません。

警告

1. ガラス面やフィルターリングの内側や外側の清掃に、化学薬品（イソプロピルアルコールなど）を使用しないでください。
2. フィルターは、埃の蓄積や日光による変色を防ぐために、保護ポーチに入れて保管してください。
3. フィルターは壊れやすいガラスでできているので、取り扱いには注意が必要です。
4. ユーザーがフィルターレンズを取り外すことは許可されていません。



PMD-ME145-22-EN
BIOPTRON FILTER IFU



BIOPTRON AG
SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU, SWITZERLAND
PHONE: +41 43 888 28 00 | E-MAIL: LIGHT@BIOPTRON.COM



WWW.BIOPTRON.COM

日本語