




BIOPTRON[®] 
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepter Group

FILTRE

ROMÂNĂ (RO)

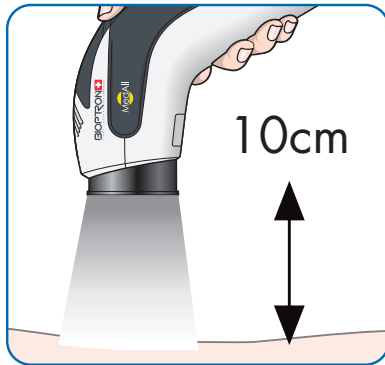

1



2



3



4

CUM SE UTILIZEAZĂ?

Poziționați dispozitivul BIOPTRON cu filtrul dorit la o distanță de 10 cm pentru a acoperi zona pe care doriți să o tratați (Imaginea 1). Atunci când tratați zone mai mari decât diametrul filtrului de culoare, tratați una câte una în funcție de timpul recomandat.

CUM SE SCHIMBĂ FILTRUL?

Scoateți cu grijă filtrul pe care doriți să îl înlocuiți, fără să îl forțați (Imaginea 2) și introduceți filtrul de culoare dorit, așa cum este indicat în Imaginea 3. Țineți de inelul exterior al filtrului, evitând să atingeți lentila.

CUM SE CURĂȚĂ FILTRUL? (Imaginea 4)

1. Scoateți filtrul din dispozitiv ținând de inelul exterior al acestuia.
2. Utilizați o cârpă moale, umedă și care nu lasă scame pentru a evita zgârierea suprafeței de sticlă.
3. Uscați filtrul folosind o altă cârpă, care nu lasă scame.

GARANȚIE

- 5 ani dacă produsul este utilizat în conformitate cu scopul pentru care a fost creat și dacă sunt respectate avertismentele
- Această garanție acoperă defectele materiale și de fabricație
- Această garanție nu acoperă modificările estetice rezultate din uzura normală care nu afectează performanța produsului sau daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului.

AVERTISMENTE

1. Nu utilizați substanțe chimice (de exemplu, alcool izopropilic) pentru a curăța partea interioară sau exterioară a suprafeței de sticlă și a inelului exterior al filtrului.
2. Depozitați filtrul într-o husă de protecție pentru a preveni acumularea de praf și decolorarea acestuia din cauza expunerii la lumina soarelui.
3. Filtrul este fabricat dintr-o sticlă fragilă, deci trebuie manevrat cu grijă!
4. Scoaterea lentilei din inelul filtrului de către utilizator este interzisă.



PMD-ME145-22-RO
BIOPTRON FILTER IFU



BIOPTRON AG

SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU, SWITZERLAND
PHONE: +41 43 888 28 00 | E-MAIL: LIGHT@BIOPTRON.COM



WWW.BIOPTRON.COM

ROMÂNĂ (RO)