




BIOPTRON[®] 
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepter Group

FILTRE

SLOVENSKY (SK)

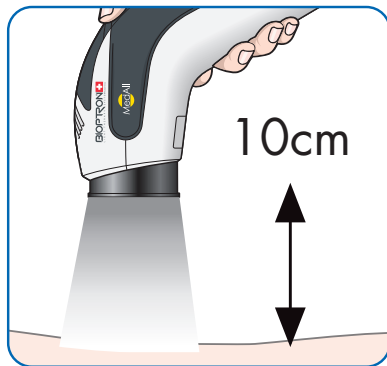

1



2



3



4

AKO VÝROBOK POUŽÍVAŤ?

Prístroj BIOPTRON s požadovaným filtrom umiestnite vo vzdialenosti 10 cm tak, aby pokryl oblasť, ktorú chcete ošetriť (obrázok 1). Pri ošetrovaní väčších oblastí, než je priemer farebného filtra, ich ošetrujte po častiach v dĺžke odporúčanej doby.

AKO VYMENIŤ FILTER?

Opatrne a bez násilia vyberte filter (obrázok 2), ktorý chcete vymeniť, a vložte požadovaný farebný filter, ako je znázornené na obrázku 3. Filter chyťte za jeho vonkajší obvod a nie za sklíčko.

AKO VYČISTIŤ FILTER? (obrázok 4)

1. Vyberte filter z prístroja pridržaním vonkajšieho obvodu filtra.
2. Použite mäkkú, vlhkú handričku bez vlasu / vlákien, aby nedošlo k poškrabaniu skleneného povrchu.
3. Vysušte filter inou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

ZÁRUKA

- 5 rokov, pokiaľ je výrobok používaný na určený účel a pokiaľ sú rešpektované varovania
- Táto záruka sa vzťahuje na vady materiálu a výrobné vady
- Táto záruka sa nevzťahuje na estetické zmeny spôsobené bežným opotrebením, ktoré neovplyvňujú výkon produktu, alebo na škody spôsobené nesprávnym používaním produktu.

VAROVANIE

1. Na čistenie vnútornej alebo vonkajšej strany skleneného povrchu nepoužívajte žiadne chemikálie (napr. izopropylalkohol).
2. Uchovávajte filter v ochrannom vrecku, aby sa zabránilo hromadeniu prachu a zmene farby v dôsledku vystavenia slnečnému žiareniu.
3. Filter je vyrobený z krehkého skla, preto je nutné s ním zaobchádzať opatrne!
4. Užívateľovi nie je dovolené odstrániť sklenenú šošovku filtra.



PMD-ME145-22-SK
BIOPTRON FILTER IFU



BIOPTRON AG

SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU, SWITZERLAND
PHONE: +41 43 888 28 00 | E-MAIL: LIGHT@BIOPTRON.COM



WWW.BIOPTRON.COM

S L O V E N S K Y (S K)